

Cómo usar su báscula


Para cargar su dispositivo, conecte un extremo del cargador al puerto del dispositivo y el otro extremo al cargador de pared. Enchufe el cargador de pared a la toma de corriente.



Presione el botón en la parte trasera de la báscula durante 10 segundos para encender el dispositivo.


1

Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana (evitando alfombras o superficies blandas).

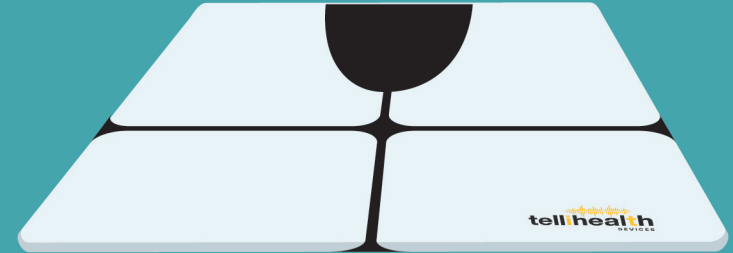


2

Párese sobre la báscula con los pies separados de manera uniforme y manténgase quieto. La báscula se encenderá automáticamente. Su peso aparecerá en la pantalla después de tres segundos, como se muestra abajo.

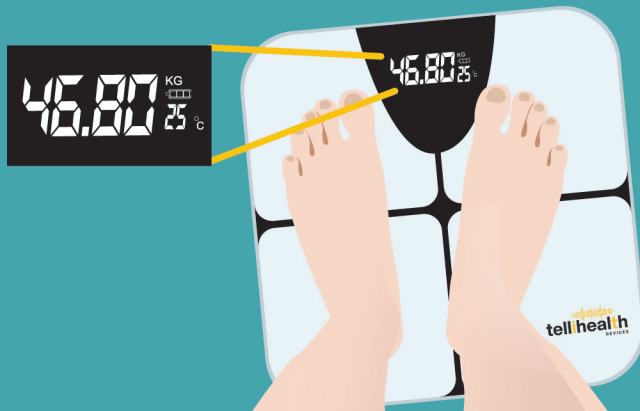


3

Step off the scale. It will display a circling line

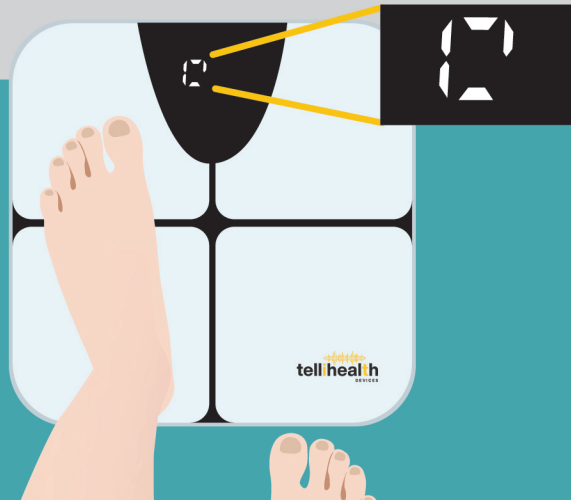

4

Wait until it displays "PAS".

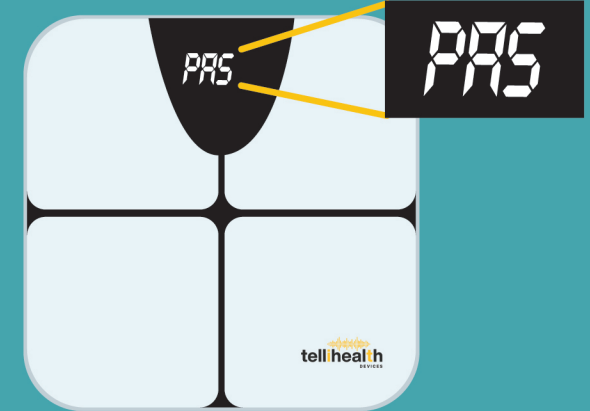

5